

Accessoires voor ultrasoonbaden



Korfdrager

Beoogd gebruik

De producten ondersteunen de ultrasone reiniging door de opname en positionering van de te reinigen objecten. Het gebruik van de producten vindt plaats in combinatie met BANDELIN-ultrasoonbaden in het kader van de handmatige en vóór of na de machinale reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen.

De producten zijn medische hulpmiddelen van klasse I conform Verordening (EU) 2017/745.



Gebruikersgroep

De producten worden in de commerciële reiniging en desinfectie door gekwalificeerd vakpersoneel gebruikt.

Volg de gebruiksaanwijzing van het preparaat en het ultrasoonbad.

Veiligheid



Risico op verbranding

Bij of na de reiniging en desinfectie kunnen de producten heet zijn.

- Aanraking kan tot verbranding leiden.
- Draag geschikte veiligheidshandschoenen

of zorg ervoor dat de producten voldoende zijn afgekoeld voordat u ze uit het ultrasoonbad neemt.



Infectiegevaar

De producten komen volgens de toepassing in contact met besmette instrumenten. Bij de omgang bestaat infectiegevaar.

- Draag geschikte veiligheidshandschoenen en eventueel andere persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Gebruik geen beschadigde producten.



Risico op letsel

Beschadigde producten kunnen scherpe randen hebben en letsel veroorzaken.

- Controleer regelmatig op beschadigingen.
- Gebruik geen beschadigde producten.



Productbeschadiging

Het gebruik van agressieve preparaten of mechanische overbelasting kan de levensduur van de producten verkorten.

- Controleer regelmatig op beschadigingen.
- Gebruik geen beschadigde producten.
- Vermijd overbelasting van de producten. Neem de maximale belastbaarheid in acht.


Product	Maximale belasting
KT 30, KT 57, KT 30 Z, KT 57 Z, KT 3000 Z L, KT 3000 Z R	10 kg


Ga voor meer informatie naar www.bandelin.com.


Instructies voor reiniging en desinfectie


Reinig de producten vóór elk gebruik en vóór de verwijdering.

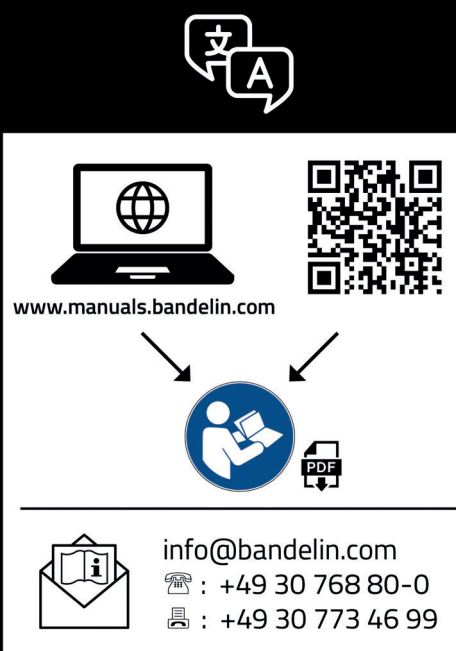

Ernstige gebeurtenissen dienen aan BANDELIN electronic GmbH & Co. KG en de bevoegde instantie gemeld te worden.









www.manuals.bandelin.com



 info@bandelin.com

 : +49 30 768 80-0
 : +49 30 773 46 99